



牙模套件使用说明书



欢迎加入EasySmiles


您向更美丽的微笑走近了一步

感谢您选择EasySmiles。在此套件中，您可以找到制作牙模所需的所有工具和材料：

- 使用说明书
- PVC一次性手套
- 制作牙模所需的基质和催化剂
- 牙模托盘
- 开口器


建议您先去完成在线“微笑测试”。这样在收到您寄出的牙模和发送的照片后，我们就能立即开始规划您的治疗方案。

您目前处于“Step 2 牙齿印模”阶段。寄回您的牙齿印模并上传牙齿照片后，您将获得3D治疗方案和一套隐形矫治器，开启您的隐形正畸之旅。

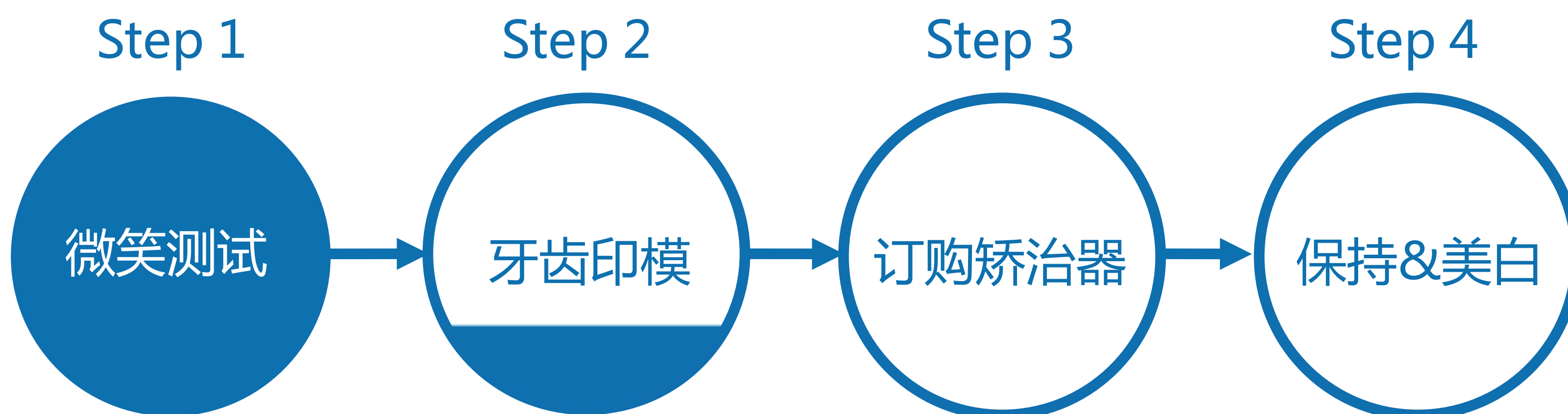

联系电话：010-82709810

准备

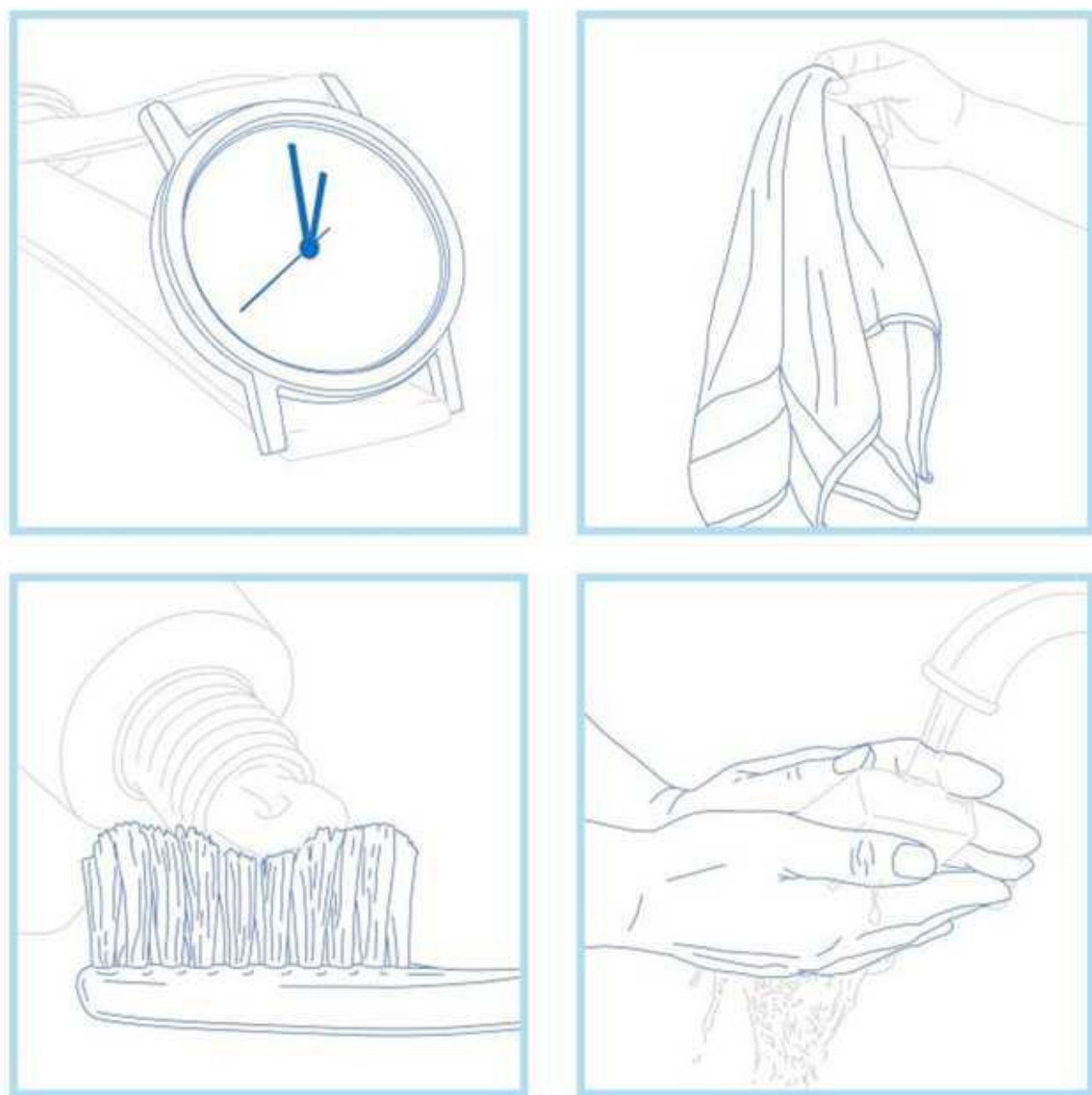

在开始之前

请认真阅读本说明书。您将需要：

- 带有分秒显示的计时器
- 纸巾
- 刷牙和用牙线剔牙
- 洗手
- 务必戴上套件内的PVC手套。不要使用乳胶手套。

您也可以扫码观看我们的教学视频：




第 1 步

从1个**基质盒子**和1个**催化剂盒子**中分别取出印模材料。

请注意：

一次只做一个托盘。在接触印模材料和制作牙模的时候，请务必戴上套件内的PVC手套。

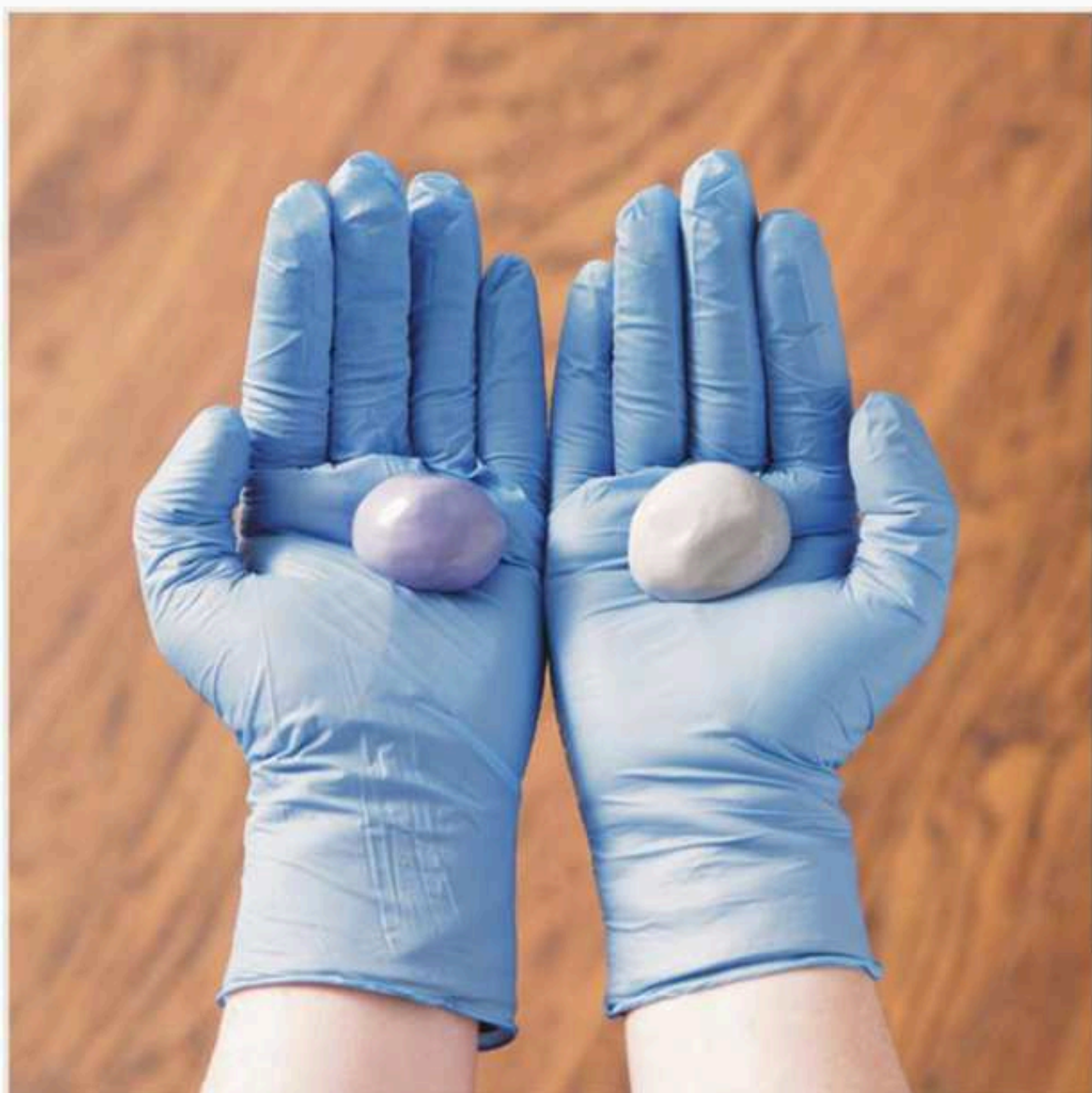

混合并制作模具



25秒

第 2 步

将一盒子基质印模材料和一盒子催化剂印模材料快速的混合在一起，直至它们完全混合，没有任何颜色的漩涡，成为均匀统一的颜色为止。

请注意：

一旦开始混合，您务必在 **60 秒**内将装有印模材料的托盘放入口腔内。



10秒

将印模材料搓成厚实的圆柱形状。



25秒

第 3 步

在 25 秒内，均匀的将印模材料放在托盘内，形成“U”字形。平放即可，不要挤压到位。让印模材料延伸到托盘的后缘，以确保能有效捕捉到臼齿的形状。

制作上齿印模




第 4 步

张开嘴巴，保持放松，将装有印模材料的托盘放入口内。

将托盘停留口内**3分30秒**。

请注意：


将上齿咬入印模材料，直到您感觉到牙齿接触到托盘的底部为止。用拇指将托盘的底部推入臼齿。

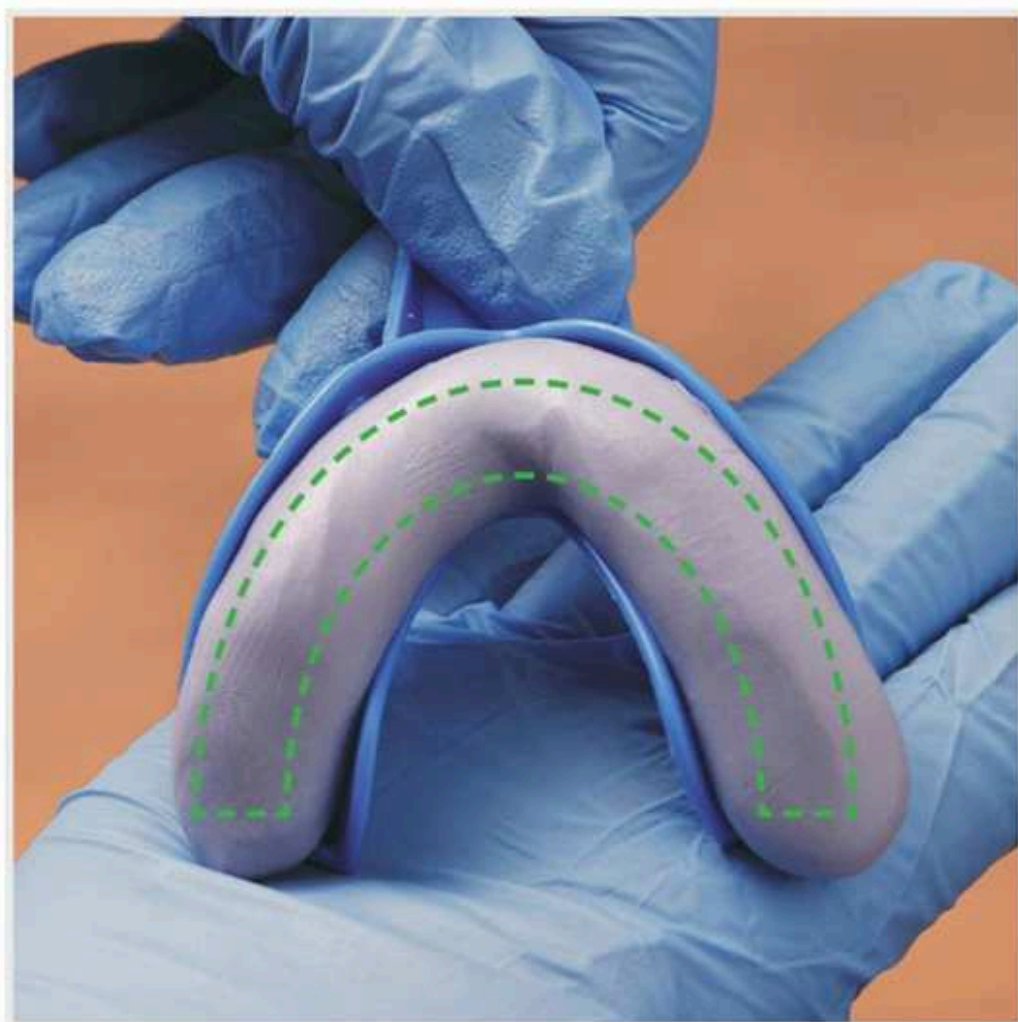

请注意：

一旦托盘完全放置就位，请勿扭动或移动托盘。

绿色虚线区域是您咬入牙齿的最佳位置，包括臼齿。最里面的臼齿至少有一半要被牙模捕捉到，这样才会让隐形牙套准确的贴合。

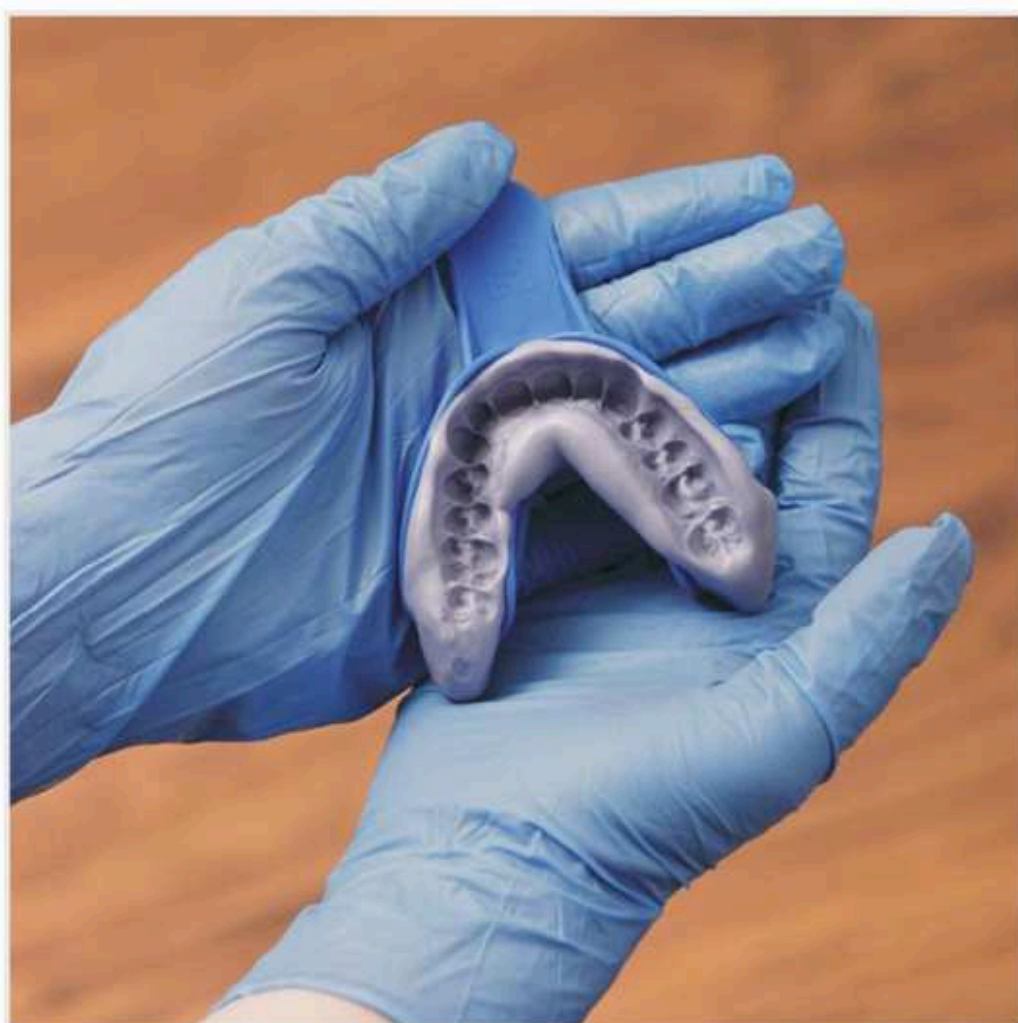

第 5 步

轻轻取下您的第一个牙模，并检查是否存在缺陷。



在制作更多的牙模之前，请使用下面的自我检查清单来 比对您的第一个牙模的结果。

请注意：

不要将印模材料从托盘中取出。

联系电话：010-82709810

自我检查清单



不合格牙模：牙龈线缺失

检查所有牙齿的牙龈线。在您牙齿和牙龈之间应该有一条清晰的线贯穿整个牙床。

这是牙模必须重做的头号原因。

常见原因：


- 托盘未被充分压入，仅记录了牙冠的形状。
- 托盘取出过早，或者托盘置入后发生了移动。



合格牙模：牙龈线存在

您的牙模应该有一条围绕所有牙齿的牙龈线。

自我检查清单

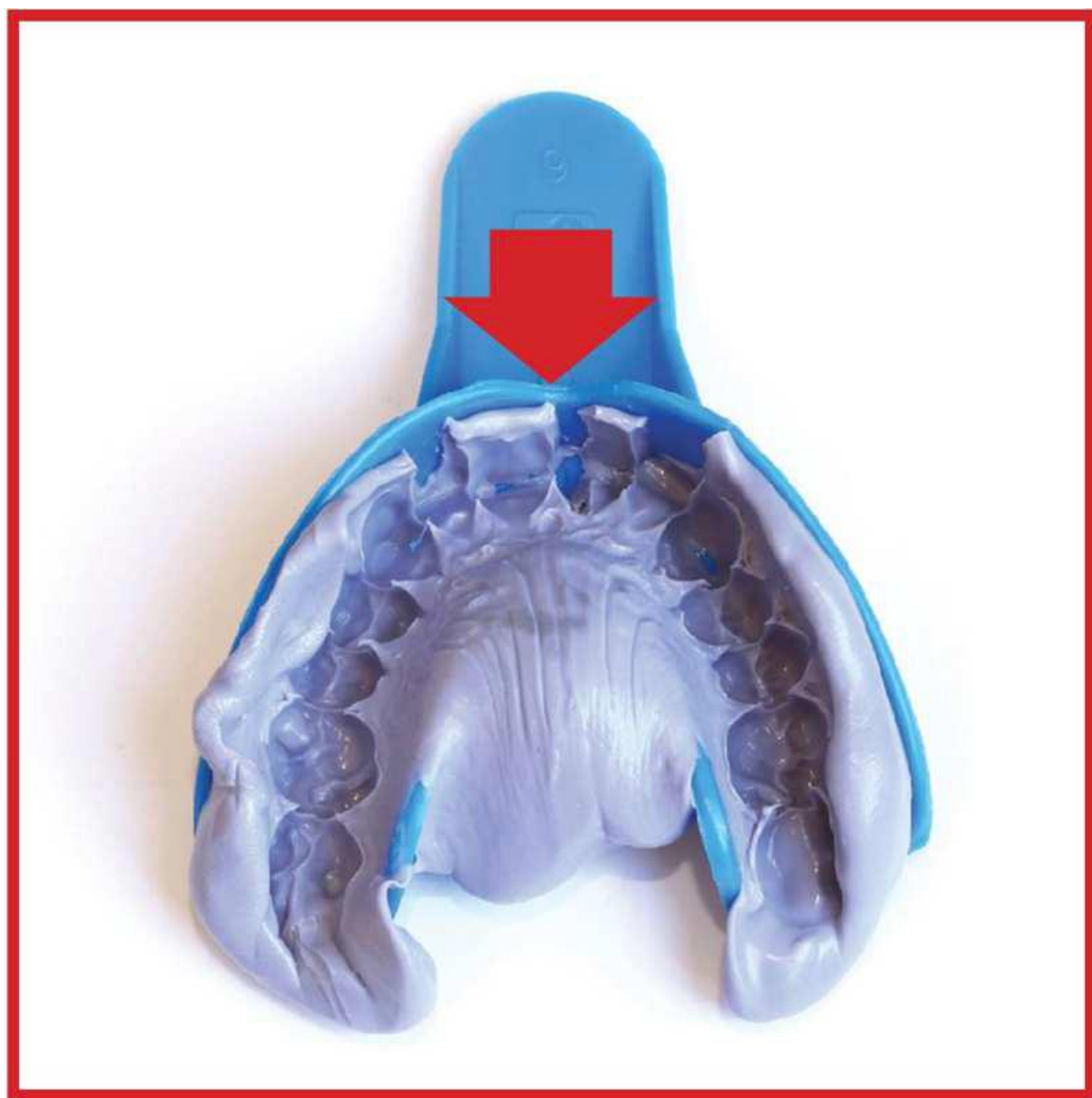

不合格牙模：托盘露出

仔细检查牙模是否有露出蓝色的托盘的地方。

常见原因：


- 托盘压入得过深。
- 托盘压入到口腔的一侧过深，或者托盘太小。
- 托盘在口腔中过于靠后，导致门牙与托盘发生刮蹭。



合格牙模：托盘未露出

牙模的任何区域均未见托盘露出。

自我检查清单

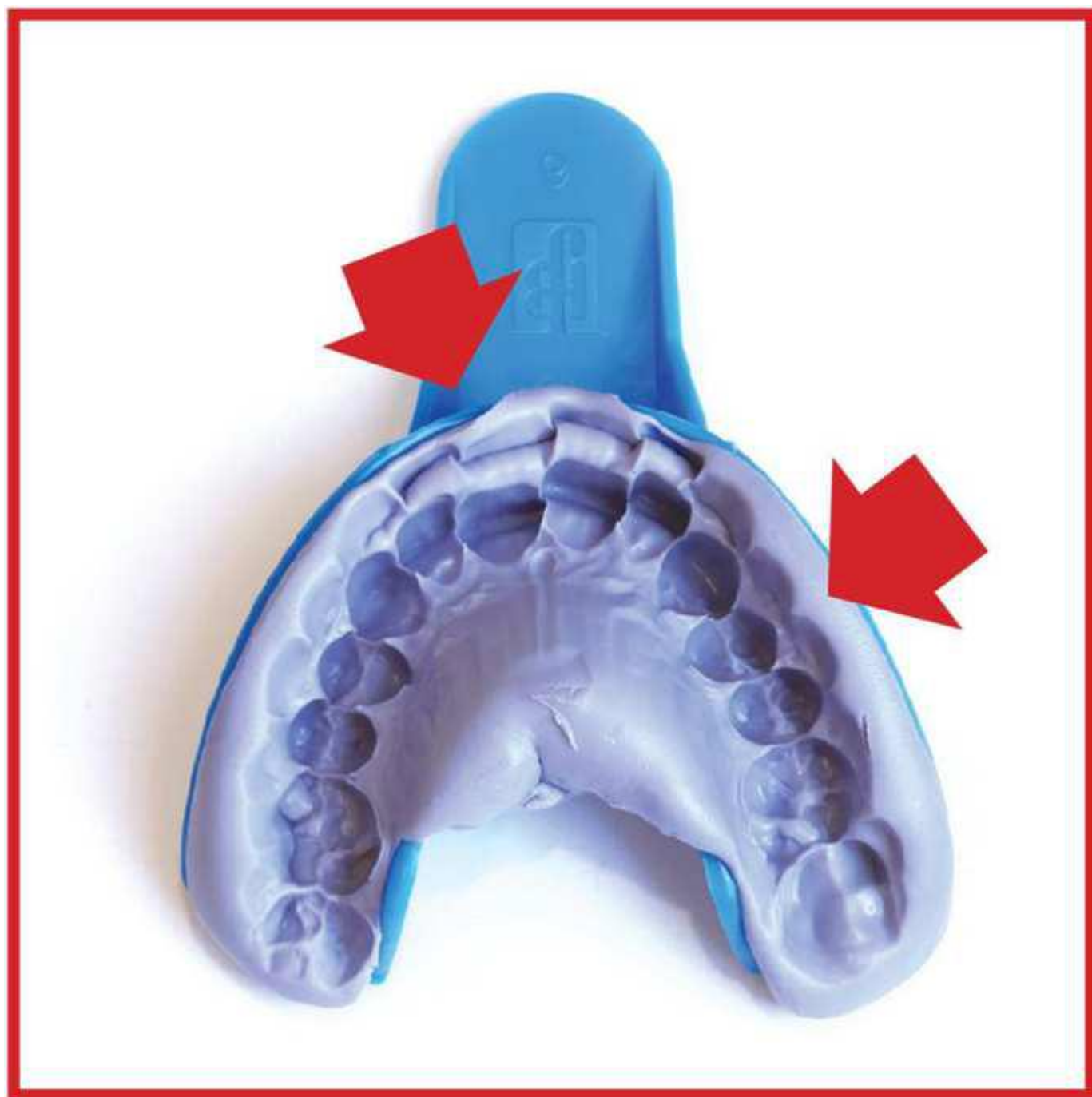

不合格牙模：双排牙印

检查牙模最深的部分，应该看到所有牙齿的单排、清晰的牙印。

常见原因：


- 托盘刚放入口腔时是部分嵌入，然后又被移动至完全嵌入。



合格牙模：单排牙印

您的牙模应该具有单排牙印。

自我检查清单

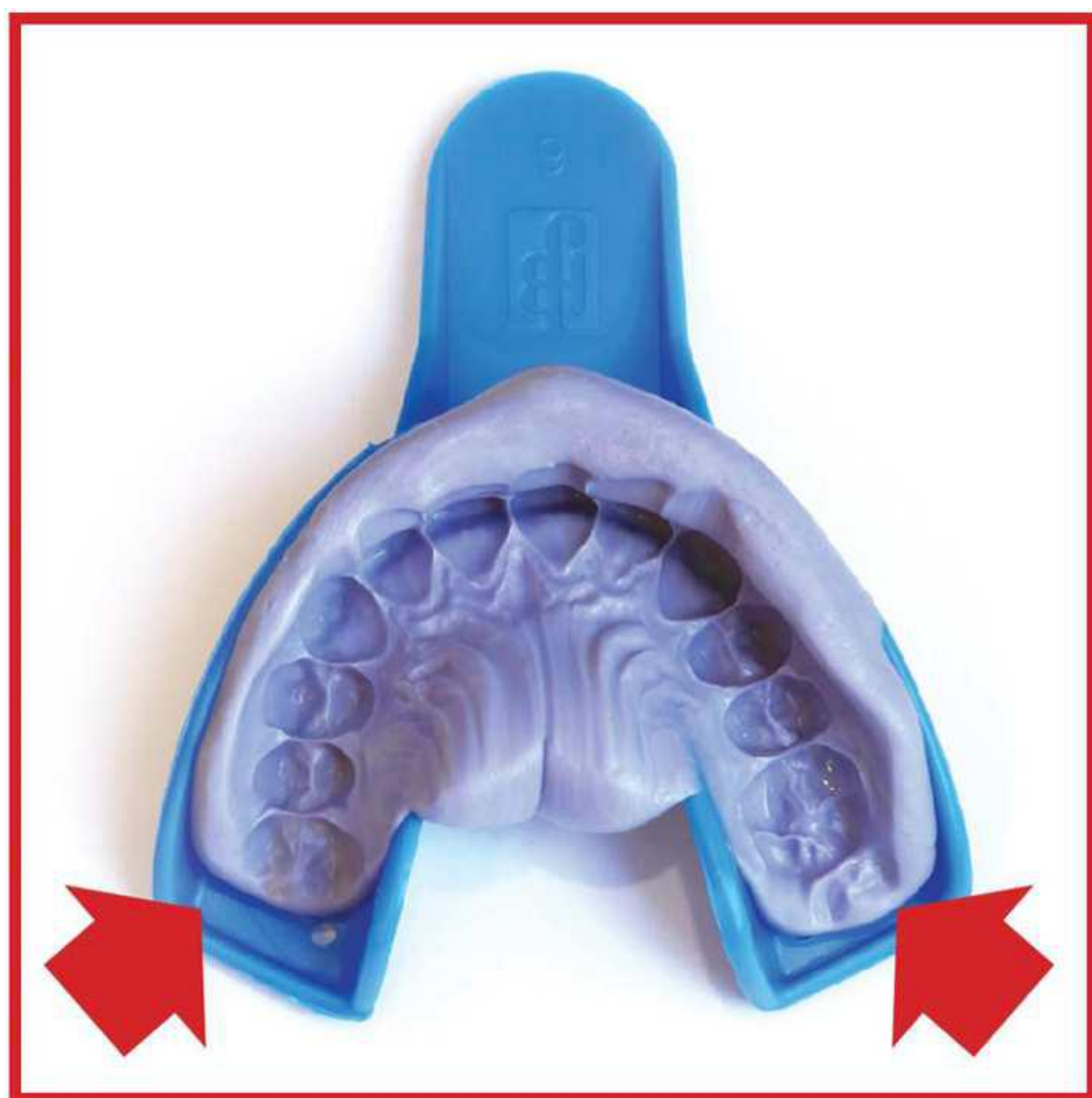

不合格牙模：未捕捉到后牙

检查您牙模的后牙，后牙至少要有一半要被牙模捕捉到，这样才会让隐形牙套准确地贴合。

常见原因：

- 托盘足够长，但印模材料不够长，以致未捕捉到后牙。
- 托盘不够长，请联系我们，我们会给您寄一个更大尺寸的托盘。



合格牙模：捕捉到后牙

最里面的臼齿（包括智齿）至少要有一半要被牙模捕捉到。

制作剩余的牙模




制作剩余的上下齿印模

请重复第 2 步到第 5 步，用剩余的托盘制作牙模。

请注意：


即使只做部分治疗或者牙模有缺陷，也要将盒中的所有 4 个牙模（2 个上 齿和 2 个下齿）制作并交回。

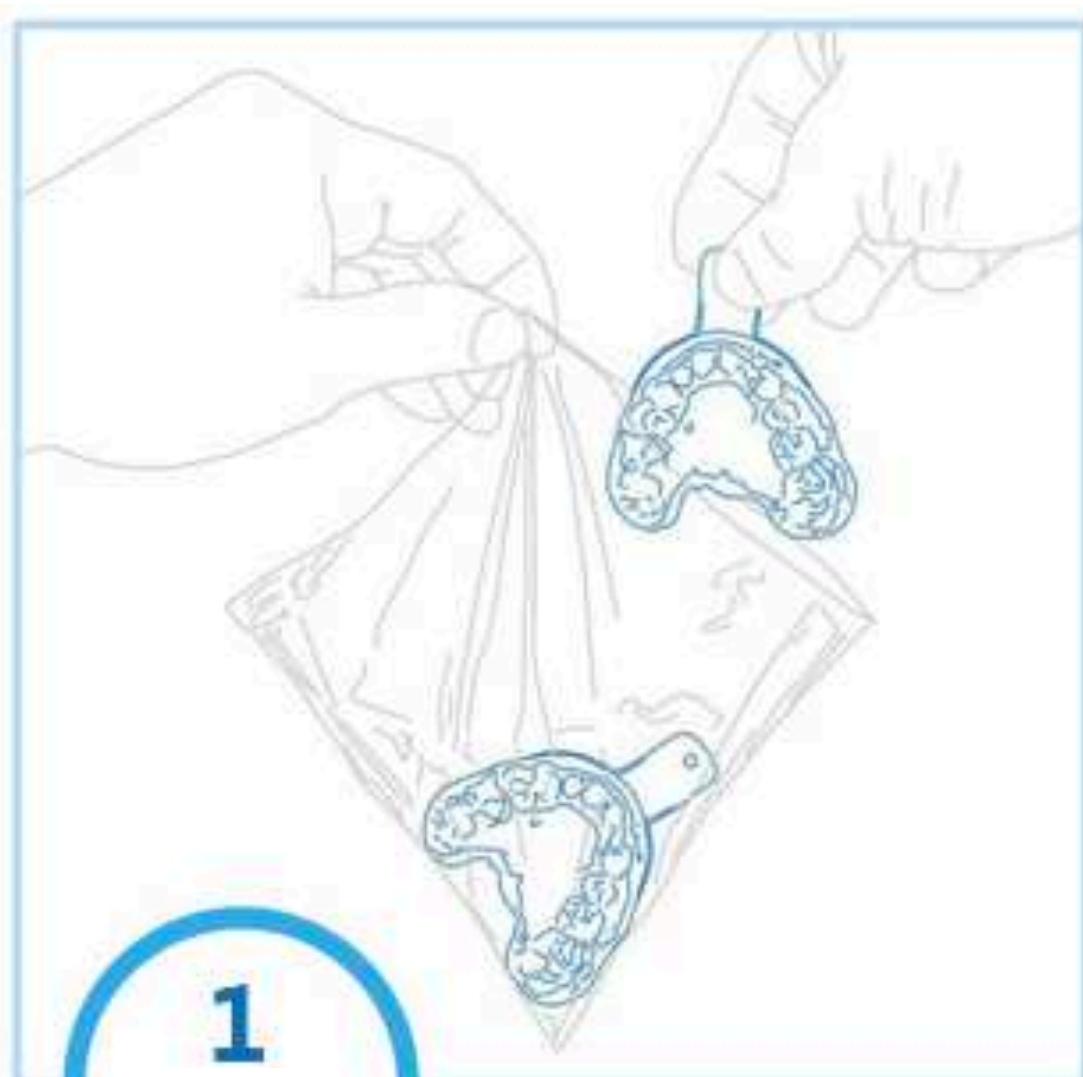

1

整理


我们要全部的牙模，无论好坏。

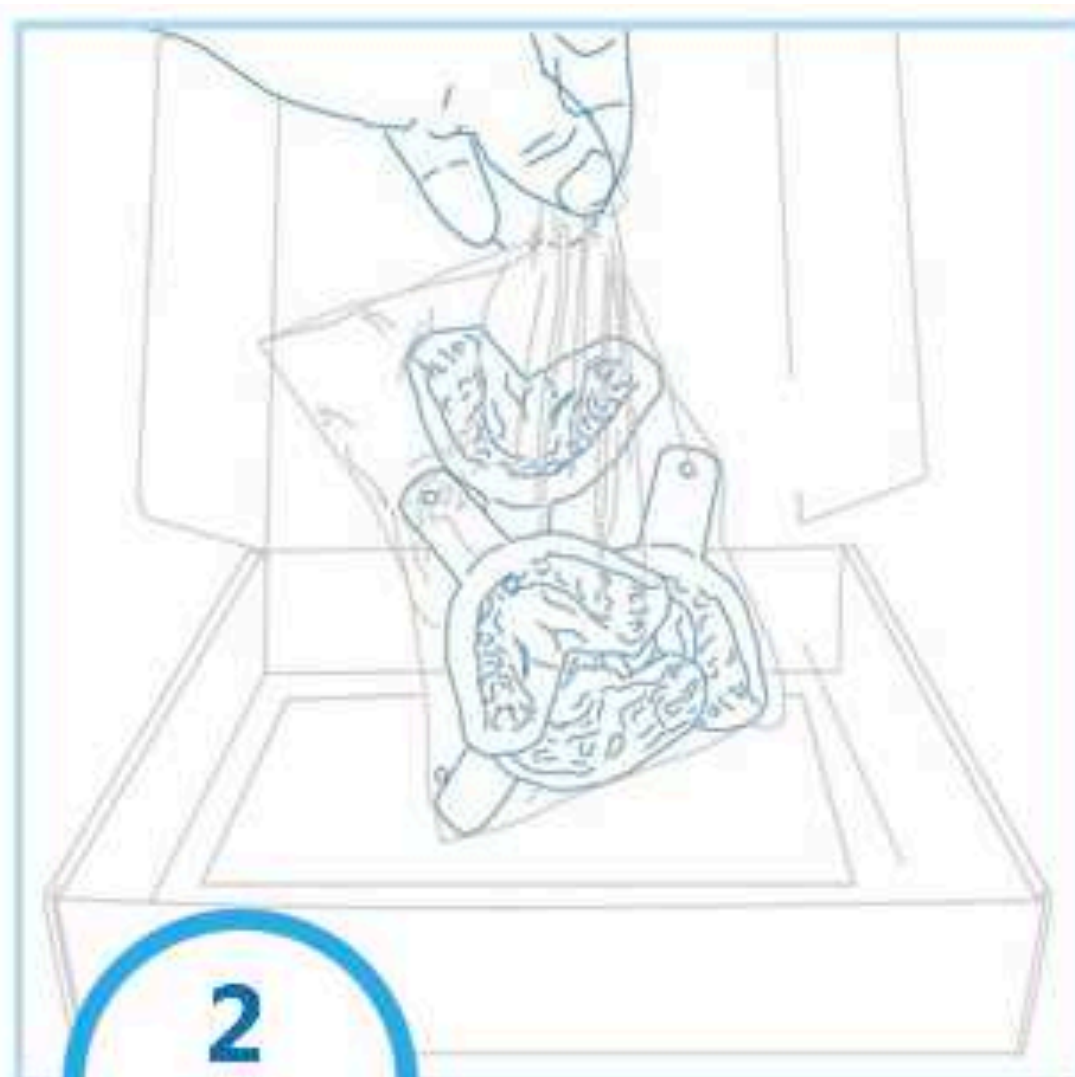

2

打包

将牙模放入盒内。

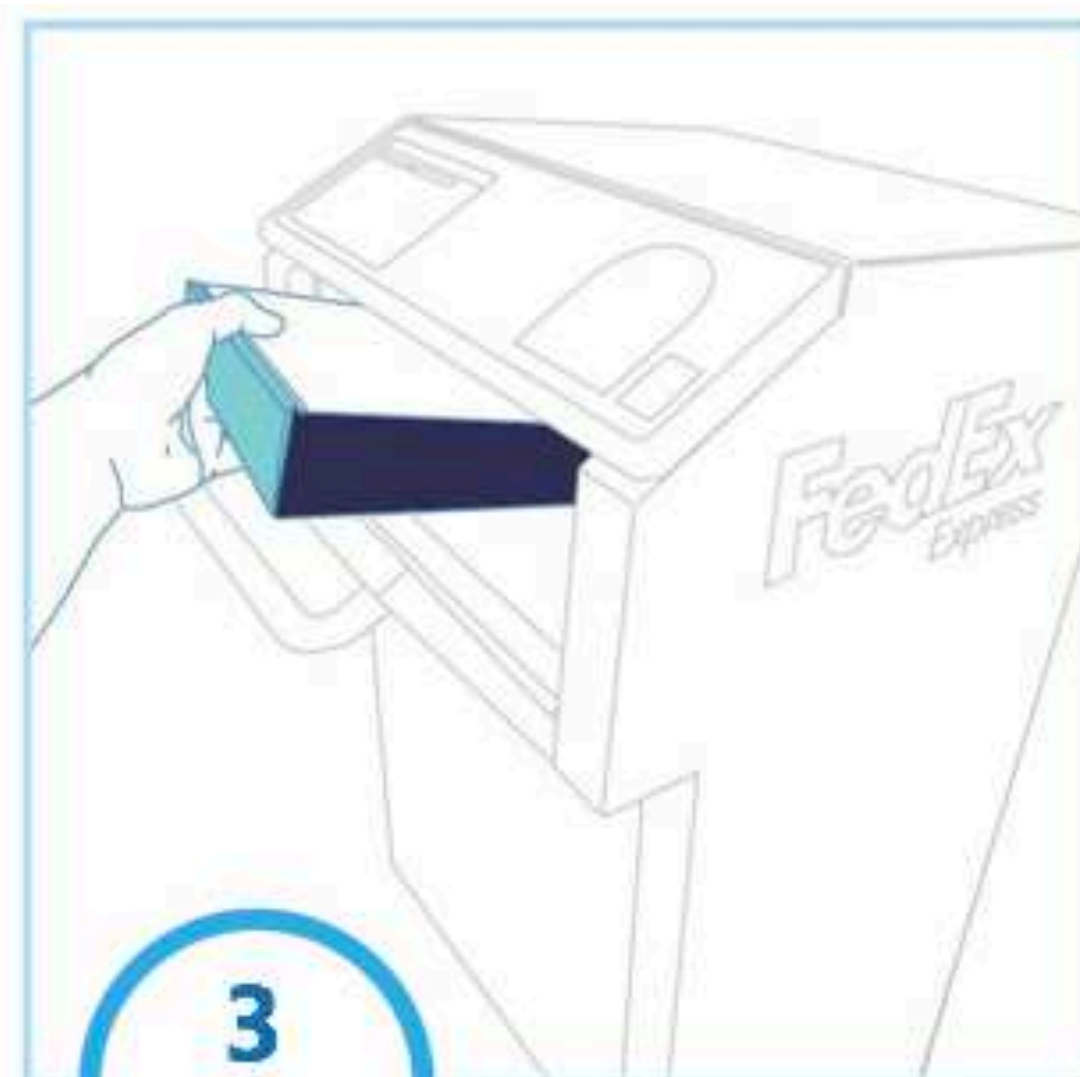

3

快递

联系快递上门取件，寄出包裹。


请在 48 小时内返回此套件！

联系电话：010-82709810


微笑时刻

恭喜您完成了牙模的制作，下面是时候微笑了！


为向主治医师提供更详细的牙齿信息，您需按照下图拍摄5张照片。您可以利用您的手指或套件里的开口器撑开口腔，完成拍摄。

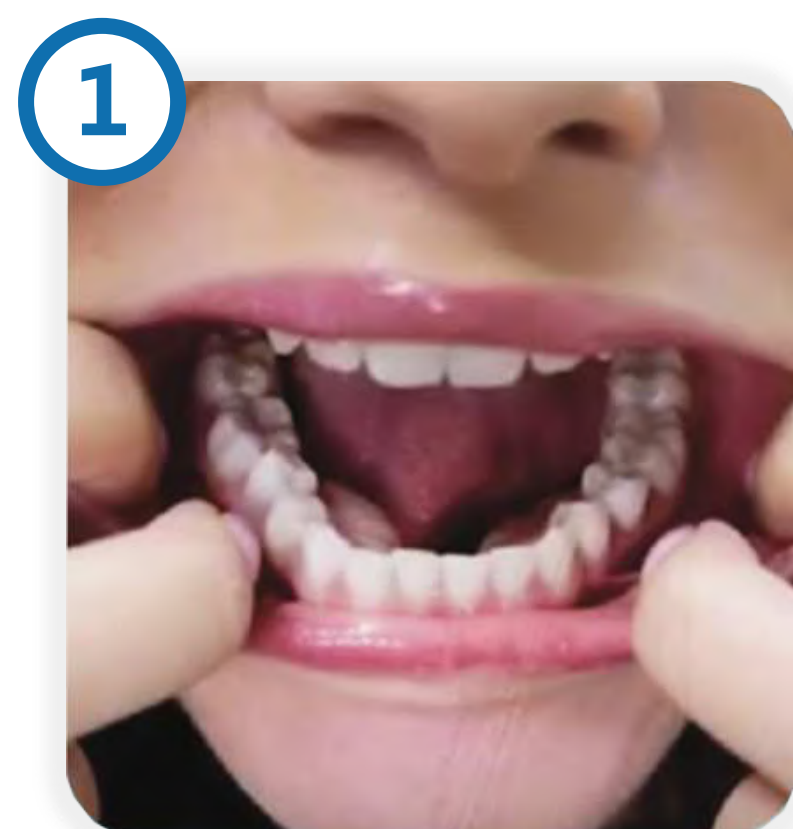

张嘴下齿照

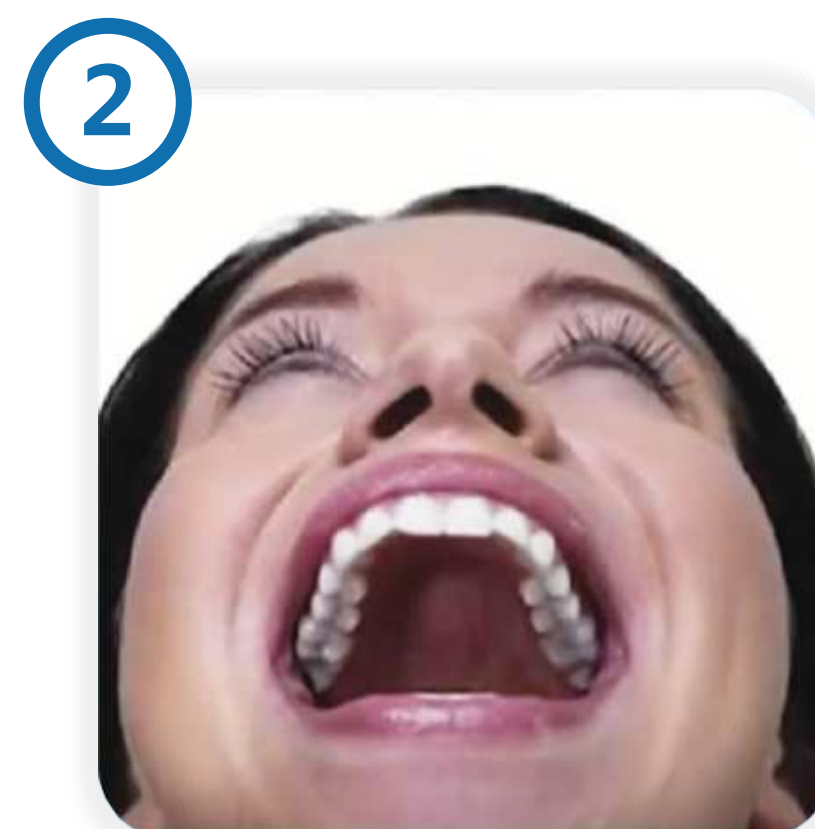


张嘴上齿照

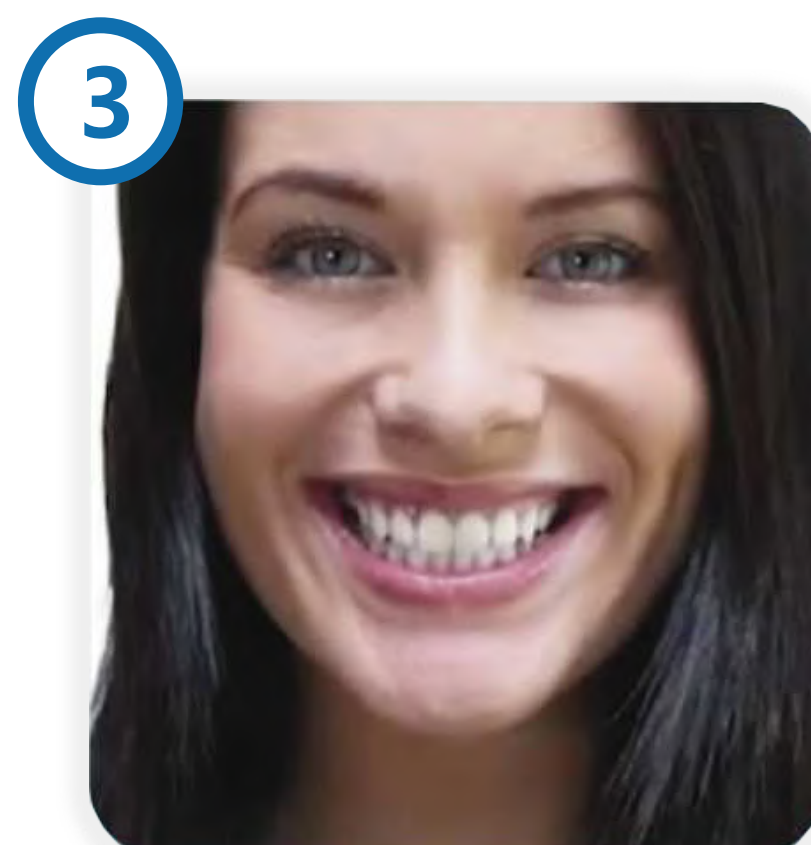

露齿正面照



露齿侧面照

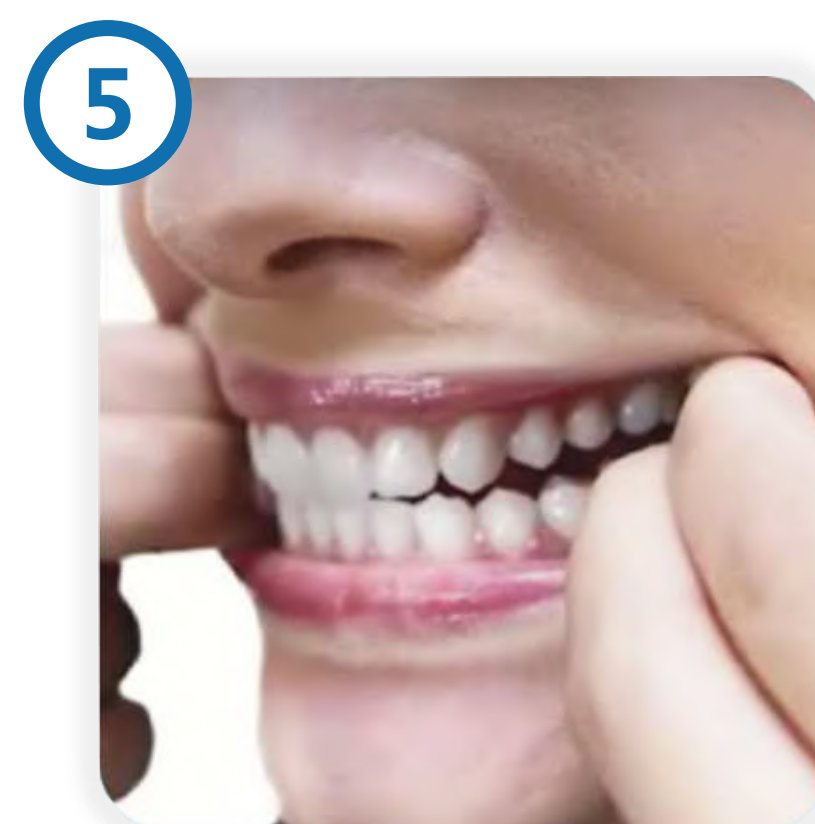

露齿侧面照

上传照片

请把您拍摄的照片发给我们


打开微信扫描如下二维码，添加小助手为好友。请发送您拍摄的5张照片，并备注您的电话号码。

EasySmiles小易同学



您正畸旅途中最忠实的小伙伴

您已完成“Step 2 牙齿印模”。您将于3星期内获得3D治疗方案；4星期内收到一套隐形矫治器，开始您的隐形正畸之旅。

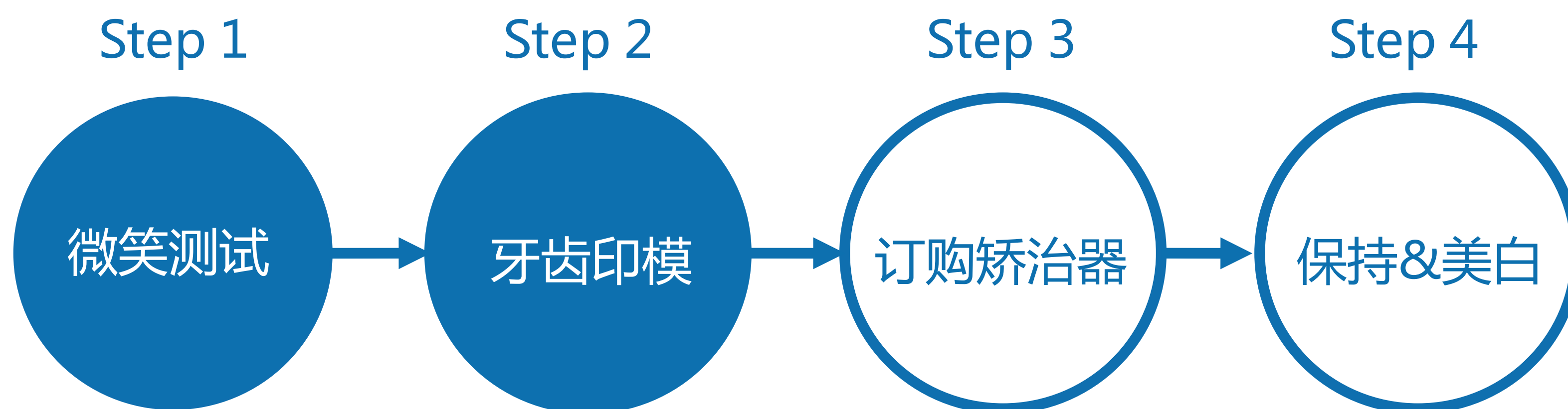

联系电话：010-82709810

等待您的矫治器吧



联系电话：010-82709810



如果我们的牙科医师确定远程治疗不适合您，您购的评估
套件将全额退款。